


GERMINATOR 500 GLASS BEAD STERILIZER

微玻璃珠手术器械消毒器

(海关 HS 编码: 84192000)

GERMINATOR™
500 THE GERM TERMINATOR
DRY STERILIZER

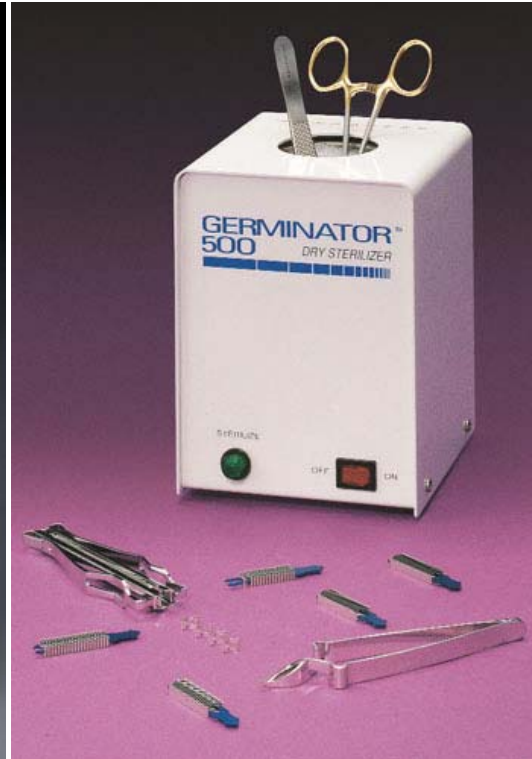

GERMINATOR 500™ is a convenient effective way to quickly decontaminate your micro-dissecting instruments. No more need for messy chemicals or open flames in the lab, and the small footprint saves bench space!

Germinator 500 是一款操作简便，价格便宜，能够快速消毒小动物外科手术器械的消毒工具。独特的玻璃珠浴槽可持续耐热 500 华氏度（260 摄氏度），任何时候都可以将清洗过的手术器械插入其中进行消毒，速度极快，只需要 2-5 秒钟即可达到效果！30 秒内手术器械变凉可以使用。不用化学试剂，不用火，符合美国国立卫生研究院（NIH）的标准，在使用了一天之后，底盘也保持清凉。该灭菌器体积小，附带一包玻璃珠和使用说明。

Germinator 500 是被极力推荐的小动物外科手术器械的理想干热消毒器。



美国健康医疗仪器国际公司

American Health & Medical Supply International Corp.

35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583. U.S.A.

You should change your glass beads approximately every 6 months or when beads appear dirty. Inserting dry instruments that are free of tissue and other culture will help extend the life of the glass beads. To replace the beads, wait until the Germinator cools completely, then carefully dispose of the old beads. Use Roboz Surgical Instrument Co. item number DS-400 Replacement Glass Beads to refill your Germinator.

Features include:

- Easy to use
- Fast, effective decontamination
- Small footprint saves bench space
- Proven durable design
- Perfect for micro-dissecting scissors and forceps
- CE Mark
- 1 YEAR WARRANTY!
- Modular Cord
- Exclusive Well Collar

Specifications:

- Measurements: Unit: 6.75" x 5.25" x 5.25" (H x W x D)
- Stainless Steel Well: 2.0" diameter x 4.0" deep (inside dimensions)
- Weight: 4.5 lbs.
- CE Test Report No# 991004/GERM/EMC
- 041800/AC187/LVD
- Operating Temp: 500°F 15° (233°C)
- Glass Beads: 1.5mm lead free glass balls

Technical specifications

Warm Up	Warm Up Time	20 min
Working	Working Temp	250° C (approximately 500° F)
Ste	Sterilization Time	2-5 sec
Well Size	Well Size	20 cm deep x 5 cm diameter